

ROLTEC BOA 2

CENTERSTOL




ROLTEC

MED BREDDE PÅ KUN 59 CM KOMMER EN BOA 2 RUNDT OVERALT...

- Super kompakt og stilrent design
- Eminente køreegenskaber med BOA 2's nye hjulophæng også på løst underlag
- Styring fra Penny & Giles (R-NET) med mange tilpasningsmuligheder
- Kraftfuldt LED lys
- Ekstremt stærke motorer på 400 W pr. motor som giver en enorm trækraft - selv ved lave hastigheder
- Stor driftssikkerhed
- Stor aktionsradius
- Lang holdbarhed og stor genbrugsværdi

LØFTE - VIPPESYSTEM

- ROLTEC BOA 2 har et kompakt elektrisk løft/vip system, der kan øge siddehøjden med 31 cm. Med løftet kan du komme i ansigsthøjde med de fleste - og nå de ting som måske længe har været uden for rækkevidde. Derudover gør systemet det muligt at vippe fra 0 til 50 grader og hvile ryggen når det er påkrævet.
- Elryg kombineret med el-vip giver optimale muligheder for varierende siddestillinger.

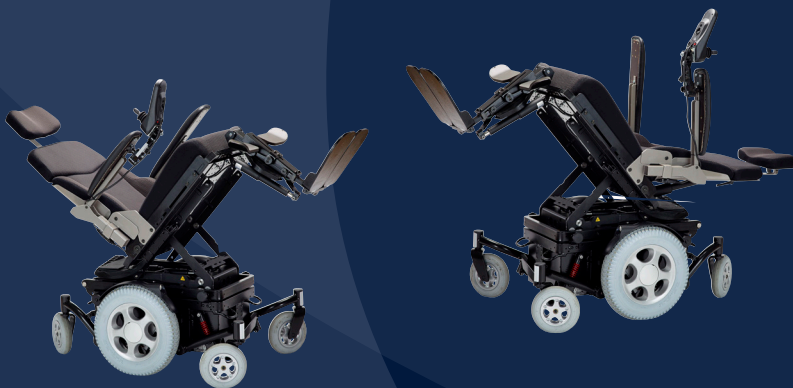

Hvis du ønsker mere information om den nye ROLTEC BOA 2, så kontakt os per telefon eller gå ind på www.roltec.com og se vores brede vifte af produkter og kørestole.



SÅ PRESSER ROLTEC CITRONEN IGEN...

Med "BOA 2" har ROLTEC præsteret at presse bredden på en centerdrevet kørestol ned til 59 cm! Men det er ikke det hele... Hjulophæng og affjedring er med BOA 2 ændret og optimeret, så stolen er endnu mere letkørt og terrængående end sin ophavsmand.

BOA 2 er bygget på erfaringer fra BOA' en, der kom på markedet i 2014 og som stadig er en bestseller. Målet var at producere en endnu smallere stol men med ligeså gode køreegenskaber, som vi kender dem fra BOA' en.

Og det er lykkedes!

BOA 2's små ydermål gør den særdeles velegnet at færdes i indendørs, hvor pladsforholdene er trange – og samtidig er den centerdrevne stol med sit nye hjulophæng fantastisk i skov og på stier og kommer frem selv i løst grus.

Den lave sædehøjde i kombination med reduktionen i bredden gør det let at komme under borde og manøvrere på trange steder, som f.eks i en bil og komme under rattet, når stolen samtidig skal fungere som førersæde.

BOA 2 er præcis som sin forløber bestykket med en elektronisk styring fra Penny+Giles, type R-NET. En styring som muliggør individuelle løsninger, og kan imødekomme langt de fleste brugeres behov.

Er ROLTEC BOA 2 din nye centerstol?

- ✓ Et lækkert og særdeles kompakt design
- ✓ Ultrasmal stol på blot 59 cm bred
- ✓ Programmerbar styring fra Penny+Giles
- ✓ Overbevisende trækraft selv ved lave hastigheder
- ✓ Nem at styre og kontrollere ved kørsel på ramper
- ✓ En ultralav sædehøjde på 37cm + pude som gør det let at køre ind under borde eller bruge stolen ved et almindeligt arbejdsbord.
- ✓ BOA 2 er qua sin bredde, lave højde og opbygning foran ideel som førersæde i bil – men også som passagersæde i bilen uden at udsynet forstyrres er BOA 2 ideel.
- ✓ Fastspændingsøjer til seelfastspænding i bil
- ✓ Kraftigt kørelys
- ✓ En driftssikker og robust stol med lang levetid
- ✓ Mulighed for montering af alle sædetyper
- ✓ Mulighed for montering af batterier med stor kapacitet (2x63 ah.)*

*(forøger stolens højde med ca. 2,5 cm)



ROLTEC BOA 2 — FREMTIDSSIKRET TEKNIK...

Tekniske data:

Kørestoltype:	Klasse B
Klasse B Kørestol beregnet til både indendørs- og udendørs brug.	

Mål:

Total længde:	fra 110 cm
Længde uden benstøtter:	98 cm
Totalbredde:	59 cm
Frihøjde: *.	7,5 cm
Sædemonteringshøjde:	37 cm

Siddefladens højde over gulv:

Uden pude:	37 cm
Med pude (10 cm):	47 cm
Med pude og sædeløft i top:	78 cm
Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage:	50°

Vægt:

Totalvægt uden person:	Ca. 155 kg
Maksimal personvægt med løftesystem:	140 kg

Køredata med 400 Watt motorer ved 10 km/t:

Max. kørestrækning med 33 Ah (38 Ah/C20). batterier:	Ca. 28 km
Max. kørestrækning med 51 Ah (56 Ah/C20) batterier:	Ca. 40 km
Max. kørestrækning med 63 Ah (70 Ah/C20). batterier: **.	Ca. 48 km
Stigeevne:	17%
Max. hastighed fremad: ***	Ca. 12 km/t
Pladsbehov ved 180° vending:	Fra 110 cm
Evne til at forcere kantsten uden tilløb:	8 cm

Dæk:

Centerhjul (grå)	3.00 x 8"
Hjørnehjul massiv (grå)	7" x 1 3/4"
Ventiltype	Autoventil

* Frihøjden afhænger af brugerens vægt og last.

** Denne batteristørrelse kræver et specialkit i forb. med montering og vil øge stolens grundhøjde med 2,5 cm.

*** Styringen fra Penny & Giles kan påvirke tophastigheden moderat.

Vest for Storebælt:

ROLTEC el-kørestole A/S
Lægårdsvej 13
DK - 8520 Lystrup
Telefon +45 87 43 49 00
Telefax +45 87 43 49 29



Øst for Storebælt:

ROLTEC el-kørestole A/S
Unionsvej 9
DK - 4600 Køge
Telefon +45 87 43 49 00